


Prothèse phonatoire

Soins quotidiens de la prothèse phonatoire à l'aide de la Provox Brush



Provox Brush

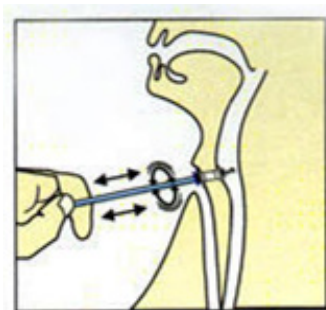

Nettoyer avec la Provox Brush

Nettoyez la prothèse phonatoire à l'aide de la Provox Brush matin et soir, ainsi qu'après chaque repas.


- Humidifiez les poils de la Provox Brush et introduisez-la dans la prothèse phonatoire. Si vous sentez une résistance, retirez la brosse.
- Effectuez un mouvement de va-et-vient tout en faisant tourner la brosse. Vous nettoyez ainsi la prothèse phonatoire en profondeur.
- Lorsque vous avez terminé :
 - nettoyez la brosse sous l'eau courante tiède.
 - laissez sécher la brosse à l'air libre.
- Remplacez la brosse au moins une fois par mois ou plus souvent si elle est usée.

Le manche bleu de la brosse peut être plié pour mieux atteindre la prothèse phonatoire. Il se plie plus facilement si vous le chauffez sous le robinet. Ne pliez jamais la partie métallique de la brosse. Lorsque le manche est plié, il n'est pas possible de tourner la brosse pendant le nettoyage. Dans ce cas, effectuez uniquement un mouvement de va-et-vient.

La prothèse phonatoire peut également être nettoyée à l'aide du Provox Flush.



Provox Flush

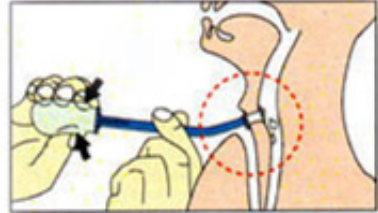

Nettoyer avec le Provox Flush

- Placez l'extrémité pointue du Provox Flush dans la prothèse phonatoire. Assurez-vous qu'il soit bien ajusté dans la prothèse phonatoire.
- Maintenez le Provox Flush fermement d'une main.
- Utilisez votre autre main pour pincer le ballonnet.
- Expulsez l'air (ou l'eau) doucement dans la prothèse phonatoire.

Que faire en cas de fuite à travers la prothèse phonatoire ?

- Contactez votre médecin traitant afin qu'il pose une nouvelle prothèse phonatoire.
- Tant que le patient n'a pas de nouvelle prothèse phonatoire, nous conseillons d'utiliser le Provox Plug pendant qu'il mange ou boit.



LaryTube

Le Provox LaryTube est une canule spécialement conçue pour fixer les cassettes Provox HME et empêcher le trachéostome de rétrécir. Si votre peau est irritée et que vous ne pouvez pas appliquer d'adhésif, vous pouvez également utiliser un LaryTube.

Mise en place du Provox LaryTube

- Humidifiez légèrement le Provox LaryTube à l'aide d'un peu d'huile goménolée.
- Placez le Provox LaryTube dans votre trachéostome.
- Fixez le Provox LaryTube à l'aide d'un Provox TubeHolder, d'un adhésif Provox ou des Provox LaryClip.
- Le LaryTube est prêt à être utilisé : vous pouvez maintenant mettre en place une cassette HME.



LaryClip



TubeHolder

Nettoyage du Provox LaryTube

- Rincez à l'eau du robinet.
- Nettoyez le Provox LaryTube à l'aide de la Provox TubeBrush. Vous pouvez utiliser la Provox Brush bleue pour nettoyer les trous.
- Rincez soigneusement le Provox LaryTube sous l'eau courante.
- Vous pouvez désinfecter le LaryTube en le faisant bouillir dans de l'eau pendant 5 à 10 minutes.



Provox TubeBrush

Adhésifs

Retrait de l'adhésif Provox

Pour retirer l'adhésif en toute sécurité sans abîmer la peau, utilisez une lingette REMOVE. Cette lingette est imprégnée d'un liquide qui dissout la couche de colle de l'adhésif, de sorte que celui-ci se détache facilement. Cette lingette contient des huiles hypoallergéniques.



- Tenez la lingette REMOVE contre le bord de l'adhésif, en exerçant une pression délicate et uniforme. Le liquide peut ainsi s'insérer entre la peau et l'adhésif, qui se décolle alors.
- Commencez toujours par la partie inférieure de l'adhésif, afin d'éviter que le liquide ne pénètre dans la stomie par l'adhésif.

- Vous pouvez ensuite retirer l'adhésif délicatement de la peau.
- Après avoir retiré l'adhésif usagé, éliminez les éventuels résidus de colle de la peau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la lingette REMOVE que vous avez employée pour décoller l'adhésif.
- Vous pouvez éliminer l'huile restante de la lingette REMOVE à l'aide d'un Provox Cleaning Towel. Cette lingette contient de l'alcool et dégraisse la peau.
- Laissez bien sécher la peau (environ 2 minutes) avant de la préparer pour un nouvel adhésif.

Application d'un nouvel adhésif Provox

Pour une meilleure adhérence de l'adhésif sur la peau, vous pouvez utiliser des lingettes SKIN PREP ou SKIN TAC. Ces lingettes sont imprégnées d'un liquide qui forme un film sur la peau lorsque celle-ci est sèche. Ce film protège la peau et permet à l'adhésif de mieux adhérer à la peau.



Skin Prep



Skin Tac

- Frottez la lingette Skin Prep ou Skin Tac sur la peau, à l'endroit où vous allez appliquer l'adhésif. **ATTENTION** : avant d'utiliser cette lingette, la peau doit être bien sèche !
- Laissez sécher Skin Prep pendant 3 minutes au moins.
- Chauffez l'adhésif en le frottant entre vos mains, en le plaçant sous votre cuisse si vous êtes assis ou en soufflant dessus à l'aide d'un sèche-cheveux.

- Lorsque vous appliquez l'adhésif sur la peau, essayez de tendre celle-ci au maximum.
- Une fois l'adhésif appliqué, massez-le doucement sur la peau pour qu'il adhère bien.
- Placez une cassette HME sur l'adhésif. Remplacez la cassette HME au moins une fois par jour (toutes les 24 heures). Vous pouvez remplacer la cassette HME plus souvent en présence de mucosités. Ne nettoyez jamais les cassettes HME sous l'eau.



Prenez soin de la peau autour de la stomie, surtout si elle est sensible.

Les conseils ci-dessous peuvent vous être utiles :

- Utilisez une barrière de protection telle que Skin Prep.
- Si la peau est irritée, vous pouvez utiliser l'adhésif Provox OptiDerm, spécialement conçu pour les peaux sensibles.
- Utilisez l'adhésif Provox OptiDerm pendant la nuit.
- Utilisez un LaryTube pendant la nuit.
- Retirez votre adhésif Provox avec précaution, en utilisant de préférence un solvant.

Les personnes dont la peau est sensible peuvent développer une irritation cutanée lors de l'utilisation de produits de protection et d'accessoires. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits jusqu'à ce que votre peau soit guérie.

Pour éviter les mucosités tenaces et la formation de croûtes dans la stomie :

Appliquer Tera-Cortril en suspension dans la stomie (selon l'avis du médecin).