

**Naar huis met een
MicroClave®.**



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

U bent opgenomen voor de toediening van een bepaalde medicamenteuze therapie waarvoor het plaatsen van een toegangsweg via een ader noodzakelijk is. Om u niet dagelijks te moeten aanprikken plaatsen wij een infuus, een katheter met een MicroClave®, een korte leiding en een afsluitklem. Aangezien het niet noodzakelijk is om daarvoor in het ziekenhuis aanwezig te blijven kunt u met een MicroClave® naar huis en op afgesproken tijdstippen terug komen voor uw infuus.

Deze folder vertelt u meer over de werking van deze MicroClave®.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan geven wij u graag meer uitleg.

Het team van het dagziekenhuis campus Torhout

Wat is een MicroClave®?

De MicroClave® voorkomt dat wanneer er geen infuus is aangesloten er geen open verbinding met de buitenlucht is, hierdoor vermindert de kans op infecties. Daarnaast wordt er door middel van positieve druk gezorgd dat de katheter niet verstopt raakt tussen de medicamenteuze therapie door. De MicroClave® wordt verbonden met de geplaatste intraveneuze katheter.

Een intraveneuze katheter is een dun, buigzaam buisje die in de ader wordt geplaatst door een verpleegkundige of door een arts. Dit systeem wordt gebruikt om intraveneus vloeistoffen of medicatie toe te dienen.

Wanneer wordt de MicroClave® gebruikt?

Om u niet dagelijks te moeten aanprikken wordt een intraveneuze katheter geplaatst, afgesloten met een


MicroClave®. Aangezien het bij u niet noodzakelijk is om een permanent infuus te hebben kan u ook ambulant terug komen voor uw volgende intraveneuze therapie op de afgesproken tijdstippen.

Bij u vertrek zal de verpleging de intraveneuze katheter en MicroClave® volledig inzwachtelen ter bescherming en voor uw comfort.

Dit is een systeem dat enkel mag worden toegepast indien de geplande therapie niet langer dan drie dagen duurt. Na de derde dag wordt de intraveneuze katheter verwijderd door een verpleegkundige of arts op de afdeling.



**Perifeer infuus met
MicroClave®**

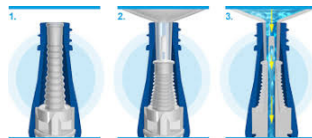

Werking MicroClave®

Nazicht thuis

Graag vragen wij u tijdens de periode dat u thuis bent af en toe eens te kijken naar de geplaatste katheter en op volgende dingen te letten:

- Indien de klem is losgekomen mag deze opnieuw dicht gezet worden.
- Indien u bloed in de leiding ziet: Laat de katheter gewoon ter plaatse zitten en meld bij terugkomst in het ziekenhuis aan de verpleegkundige dat u hebt gezien dat er bloed in de leiding zit.
- In het geval dat het verband bebloed is, moet de katheter worden verwijderd. Neem hiervoor een compres bij de hand en een kleefpleister. Maak het verband los en verwijder de katheter, druk hierna met een compres zoals er een bloedafname zou zijn gebeurd. Als u voldoende heeft nagedrukt mag u de compres weg doen en een kleefpleister aanbrengen.

Bij twijfel kunt u altijd de afdeling contacteren.

U mag **NOOIT** iets inspuiten via dit systeem. Dit mag en kan enkel door de verpleegkundigen van de afdeling of door de behandelende arts.

Bij de minste twijfel of vragen mag de afdeling altijd 24u/24u gecontacteerd worden.

Contact

Campus Torhout

Dienst kortverblijf

050 23 23 21