


Instructies voor het verwijderen van een draagbare chemopomp



1. Trek niet-steriele handschoenen aan.
2. Bekijk of er aan de pomp, leiding en insteekplaats eventuele afwijkingen zijn.
3. **Sluit** beide **klemmen**: de gele klem dichtbij de patiënt en de klem ter hoogte van het y-stuk.
4. Maak het vrije dopje los ter hoogte van het y-stuk en ontsmet dit uiteinde.
5. Sluit de spuit met 10 cc fysiologisch aan op het Y-stuk. Er kan geen bloed afgenomen worden, omdat er een terugslagklep aanwezig is.
6. Zet beide klemmen terug **open**.
7. Spuit de 10 cc pulserend in en sluit af onder positieve druk met behulp van de gele klem. Onder positieve druk sluiten we af door de laatste 2cc traag in te spuiten en tegelijk de gele klem te **sluiten**.
8. **Verwijder de naald en trek hem in veiligheid**. Er zijn twee types naalden (zie ommezijde).
9. Laat de pomp, naald en leiding aan elkaar en **verwijder in de twee zakken** die je krijgt vanuit het ziekenhuis.

Sluit deze zakken zorgvuldig af en brengt ze terug naar het dagziekenhuis zodat dit materiaal op een veilige manier kan verwijderd worden.

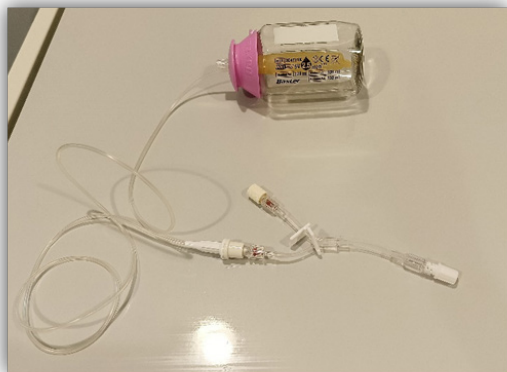

Er zijn twee types naalden:

1. Trek aan de vleugels zoals een hefboom tot je een klik hoort.



2. Fixeer de vleugels en hou het cirkeltje vast. Trek de vleugels omhoog tot je een klik hoort en je een groen bolletje in het cirkeltje ziet verschijnen.



Contact

Heb je vragen? Geef ons een seintje via onderstaande contactgegevens.

Campus Rumbeke

t 051 23 78 25

Campus Torhout

t 050 23 23 85

Campus Menen

t 056 52 24 50