


Stemprothese

Dagelijkse verzorging van de stemprothese met de Provox Brush



Provox Brush

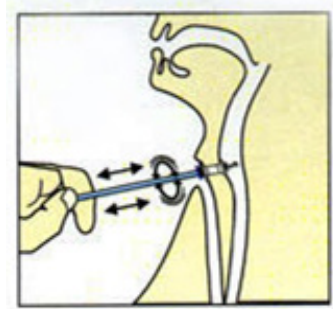

Reinigen met Provox Brush

Reinig de stemprothese 's morgens en 's avonds en na elke maaltijd met de Provox Brush.

- Bevochtig de borstelhaartjes van de Provox Brush en schuif de brush in de stemprothese. Trek de borstel terug als u weerstand voelt.
- Beweeg met de brush heen en weer terwijl u de borstel draait. Zo reinigt u de stemprothese grondig.
- Als u klaar bent:
 - reinig de brush onder stromend lauw water.
 - laat de borstel aan de lucht drogen.
- Vervang de brush minimaal eens per maand, of vaker als de borstel slijtage vertoont.

De blauwe steel van de brush kan worden gebogen om de stemprothese beter te bereiken. Buigen gaat makkelijker als u de steel warm maakt onder de kraan. Buig nooit het metalen gedeelte van de borstel. Als de steel gebogen is, kunt u de borstel niet draaien tijdens het schoonmaken. Beweeg dan enkel heen en weer.




azdelta

Uw ziekenhuis.

Naast de provox brush kan de prothese ook gereinigd worden met de Provox Flush



Provox Flush

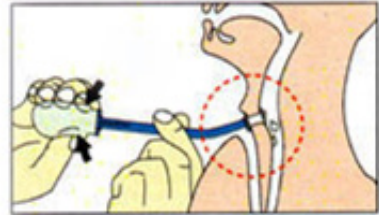


Reinigen met een Provox Flush

- Plaats het puntige uiteinde van de flush in de stemprothese. Zorg dat er een goede afsluiting is.
- Houd de flush stevig op zijn plaats met de ene hand.
- Gebruik uw andere hand om in de ballon te knijpen.
- Knijp de lucht (of het water) rustig in de stemprothese.

Wat bij lekkage door de stemprothese heen?

- Neem contact op met de behandelende arts voor het plaatsen van een nieuwe stemprothese.
- Gedurende de periode dat de patiënt nog geen nieuwe stemprothese heeft, adviseren wij de Provox Plug te gebruiken tijdens het eten en drinken.

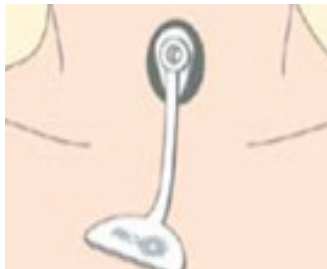

Larytube

De Provox LaryTube is een canule speciaal ontworpen om de provox HME-cassettes te kunnen bevestigen en die voorkomt dat het tracheostoma krimpt. Als men last heeft van een geïrriteerde huid en geen pleister kan plakken dan kan men ook een LaryTube gebruiken.

Inbrengen van de Provox LaryTube

- Bevochtig de Provox LaryTube licht met wat gomenolie.
- Plaats de Provox LaryTube in uw tracheostoma.
- Bevestig uw Provox LaryTube met een Provox TubeHolder, een Provox pleister of de Provox LaryClips.
- De LaryTube is klaar om te gebruiken: u kunt nu een HME-cassette plaatsen.




Laryclips



TubeHolder

Schoonmaken van de Provox LaryTube

- Spoel met kraanwater.
- Maak de Provox LaryTube schoon met de Provox TubeBrush. De blauwe Provox Brush kunt u gebruiken om de gaatjes schoon te maken.
- Spoel de Provox LaryTube goed na onder stromend water.
- U kunt de LaryTube desinfecteren door deze 5 tot 10 minuten in water uit te koken.

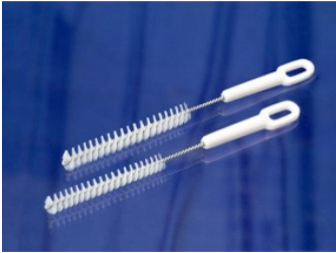

Provox Tube Brush

Pleisters

Verwijderen van de provox pleister

Om de pleister veilig te verwijderen zonder de huid te beschadigen, kunt u een REMOVE doekje gebruiken. Dit doekje is doordrenkt met een vloeistof die de lijmlaag van de pleister oplost, zodat de pleister gemakkelijk loslaat. Dit doekje bevat huidvriendelijke olieën.



- Houd het REMOVE doekje tegen de kleefrand aan en druk het voorzichtig en gelijkmatig uit. Hierdoor komt de vloeistof tussen de huid en de pleister en weekt de pleister los.
- Begin altijd aan de onderkant van de pleister om te voorkomen dat de vloeistof via de pleister in het stoma loopt.
- U kunt de pleister nu voorzichtig van de huid verwijderen.

- Na het verwijderen van de oude pleister verwijdert u eventuele lijmresten van de huid. Dit kunt u doen met hetzelfde REMOVEdoekje dat u gebruikte voor het verwijderen van de pleister.
- De achtergebleven olie van het removedoekje kunt u verwijderen met een provox cleaning towel. Dit doekje bevat alcohol en ontvet de huid.
- Laat de huid vervolgens goed drogen (ca. 2 minuten) voordat u deze gaat voorbereiden op een nieuwe pleister.

Aanbrengen van een nieuwe provox stomapleister

Voor een betere hechting van de pleister op de huid kunt u SKINPREP of SCIN TAC wipes gebruiken. Dit doekje is doordrenkt met een vloeistof die een filmlaagje op de huid vormt als deze droog is. Dit laagje beschermt de huid en zorgt ervoor dat de pleister beter op de huid hecht.



Skin Prep



Skin Tac

- Wrijf met het Skinprep of SkinTacdoekje op de huid waar u de pleister gaat aanbrengen. LET OP: voordat dit doekje gebruikt wordt, moet de huid goed droog zijn!
- Laat de Skin Prep vervolgens minimaal 3 minuten drogen.
- Verwarm de stomapleister door deze te wrijven tussen de handen, even onder uw bovenbeen te leggen terwijl u zit of door erop te blazen met een haardroger.
- Probeer de huid zo strak mogelijk te trekken op het moment dat u de stomapleister op de huid plakt.

- Na het aanbrengen kunt u de stomapleister zachtjes op de huid masseren om deze goed te laten hechten.
- Plaats een HME-cassette op de pleister. Vervang de HME-cassette minimaal iedere dag (24 uur). U kunt de HME-cassette vaker vervangen als men last heeft van slijm. De HME-cassettes nooit reinigen onder water.



Verzorg de huid rondom het stoma goed, zeker in het geval van een gevoelige huid.

Onderstaande tips kunnen helpen:

- Gebruik een beschermend barrièremiddel zoals Skin Prep.
- Wanneer de huid geïrriteerd is, kunt u de Provox OptiDerm pleister gebruiken, deze is speciaal voor de gevoelige huid.
- Gebruik de Provox Optiderm Pleister gedurende de nacht.
- Gebruik een LaryTube gedurende de nacht.
- Verwijder uw provoxpleister voorzichtig en bij voorkeur met een removemiddel.

Gebruikers met een gevoelige huid kunnen huidirritaties ondervinden door het gebruik van beschermingsproducten en hulpmiddelen. Wij adviseren u deze producten tijdelijk niet te gebruiken totdat de huid is hersteld.

Om taaie slijmen en korstvorming in het stoma te voorkomen:
Teracortril suspense aanbrengen in het stoma (volgens advies van de arts).